

< 2 6 - 1 6 >

2 0 2 6 年 9 月

先生各位

検査内容変更および受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび別掲の項目につきまして、2026年10月より検査内容の変更および受託の中止を実施することとなりましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■検査変更内容:

別掲の一覧表をご参照ください。

■変更および受託中止日:

2026年 10月 1日（木）受付分より

以上

※ 詳細につきましては、次ページ以降をご覧ください。

●検査内容変更項目一覧

項目コード	項目名	変内	更容	新	現	備考
2956	ホモシステイン	検体量 検査方法 所要日数 報告範囲		血漿 0.3 mL LC-MS/MS 4 ~ 6 日 0.3未満 ~ 最終値	血漿 0.4 mL HPLC 5 ~ 12 日 0.2以下 ~ 最終値	検査方法の変更
1012	ソマトメジンC (IGF-1)	保存温度		遠心分離後 冷蔵	遠心分離後 凍結	保存条件の見直し
2486	可溶性インター ロイキン-2 レセプター (sIL-2R)	項目コード 検査方法 基準値(単位) 報告範囲		4137 LA(ラテックス凝集比濁法) 204 ~ 587 (U/mL) 55未満 ~ 9,990,000以上	2486 CLEIA 121 ~ 613 (U/mL) 50未満 ~ 400,000以上	測定試薬の変更
5941	レジオネラ核酸同定	項目名称 検体量[容器] 基準値 報告範囲 委託先		レジオネラDNA定性 喀痰 1.0mL [容器番号 : 35番] 陰性 陰性、陽性 株式会社エスアールエル	レジオネラ核酸同定 喀痰 1.0mL [容器番号 : 27番] 検出せず 検出せず、陽性 株式会社LSIメディエンス	現委託先の受託 中止に伴い委託先 の変更
1754	抗ミトコンドリア抗体 (AMA)	報告上限 所要日数		2560以上・倍 3 ~ 4 日	20480以上・倍 2 ~ 3 日	測定試薬販売中止 による試薬変更
1755	抗平滑筋抗体	報告上限 所要日数		2560以上・倍 3 ~ 4 日	20480・倍 2 ~ 3 日	

●検査受託中止項目一覧

項目コード	項目名	中止理由	代替項目
4423	肺癌KRAS G12C変異解析	受託数僅少のため	【4091】肺癌マルチCDx AmoyDx 【4479・4480】肺癌マルチCDx遺伝子解析


●ホモシステイン

検査精度向上を目的として、検査方法を変更いたします。

なお、この変更に伴い、検体量、所要日数、報告範囲を変更いたします。

変更内容	新	現
項目コード	2956	同左
検査方法	LC-MS/MS	HPLC
検体量	血漿 0.3 mL [容器番号 : 14番]	血漿 0.4 mL
保存方法	冷蔵	同左
基準値(単位)	M : 6.3 ~ 18.9 F : 5.1 ~ 11.7 (nmol/mL)	同左
所要日数	4 ~ 6 日	5 ~ 12 日
保険点数	279点(生化学(Ⅱ)判断料 144点)	同左
報告範囲	0.3 未満 ~ 最終値	0.2 以下 ~ 最終値
報告桁数	小数1位	同左
備考	採血後速やかに血漿分離して下さい。	同左

《新法と現法の相関》

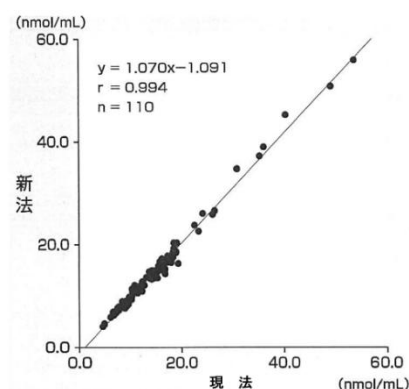


●可溶性インターロイキン-2レセプター（s I L-2 R）

測定試薬をC L E I A法からL A法による試薬に変更いたします。新法は非特異反応による偽高値を軽減した改良試薬です。新現二法の相関は良好です。

なお、この変更に伴い、項目コード、基準値、報告範囲を変更いたします。

変 更 内 容	新	現
項 目 コ ー ド	4137	2486
検 査 方 法	LA(ラテックス凝集比濁法)	C L E I A
検 体 量	血清 0.4 mL [容器番号：01番]	同 左
保 存 方 法	冷 蔵	同 左
基 準 値 (単 位)	204 ～ 587 (U/mL)	121 ～ 613 (U/mL)
所 要 日 数	2 ～ 3 日	同 左
保 険 点 数	438点(生化学(Ⅱ)判断料 144点)	同 左
報 告 範 囲	55 未満 ～ 9,990,000 以上	50 未満 ～ 400,000 以上
報 告 桁 数	整数	同 左

《新法と現法の相関》

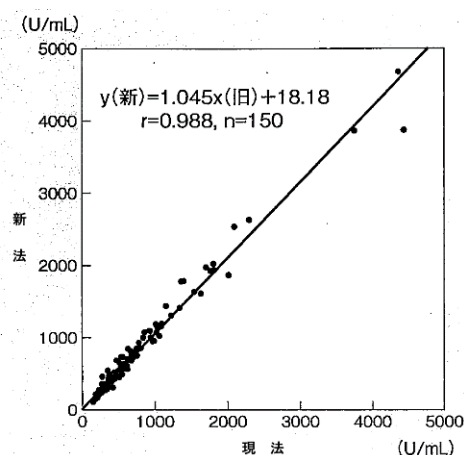

●レジオネラ核酸同定

現委託先の検査受託中止により、委託先を変更いたします。

なお、この変更に伴い、項目名称、検体量(容器)、基準値、備考を変更いたします。

変 更 内 容	新	現
項 目 コ ー ド	5941	同 左
項 目 名 称	レジオネラDNA定性	レジオネラ核酸同定
検 査 方 法	LAMP	同 左
検 体 量 [容 器]	喀痰 1.0 mL [容器番号：35番]	喀痰 1.0 mL [容器番号：27番]
保 存 方 法	凍結	同 左
基 準 値 (単 位)	陰性	検出せず
所 要 日 数	3 ～ 9 日	同 左
保 険 点 数	296点(微生物学的検査判断料 150点)	同 左
報 告 範 囲	陰性、陽性	検出せず、陽性
備 考	他項目との重複依頼は避けてください。 コンタミネーションの影響がより大きくなりますので、 検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。	レジオネラ属11菌種を検査しますが、菌種の同定は出来ません。必ず、専用検体としてご提出ください。
委 託 先	株式会社エスアールエル	株式会社L S Iメディエンス

●抗ミトコンドリア抗体

現行測定試薬の販売中止により、測定試薬を変更いたします。
 なお、この変更に伴い、報告上限、所要日数を変更いたします。

変 更 内 容	新	現
項 目 コ ー ド	1754	同 左
検 査 方 法	FAT	同 左
検 体 量	血清 0.3 mL [容器番号 : 01番]	同 左
保 存 方 法	冷 蔵	同 左
基準値(単位)	20未満 (倍)	同 左
所 要 日 数	3 ~ 4 日	2 ~ 3 日
保 険 点 数	181点(免疫学的検査判断料 144点)	同 左
報 告 範 囲	20 未満 ~ 2,560 以上	20 未満 ~ 20,480 以上

《新法と現法の相関》

新法	(倍)	1280								4
	640								6	
	320					2	5			
	160				2	14	2			
	80			2	10	2				
	40		1	11	3					
	20			13	1					
	20 未満	20	1							
	20 未満	20	40	80	160	320	640	1280	(倍)	
	現法									

		現法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	79	0	79
	陰性	1	20	21
計		80	20	100

陽性一致率: 98.8%(79/80)
 陰性一致率: 100.0%(20/20)
 判定一致率: 99.0%(99/100)

●抗平滑筋抗体

現行測定試薬の販売中止により、測定試薬を変更いたします。
 なお、この変更に伴い、報告上限、所要日数を変更いたします。

変 更 内 容	新	現
項 目 コ ー ド	1755	同 左
検 査 方 法	FAT	同 左
検 体 量	血清 0.3 mL [容器番号 : 01番]	同 左
保 存 方 法	冷 蔵	同 左
基準値(単位)	20未満 (倍)	同 左
所 要 日 数	3 ~ 4 日	2 ~ 3 日
保 険 点 数	なし	同 左
報 告 範 囲	20 未満 ~ 2,560 以上	20 未満 ~ 20,480

《新法と現法の相関》

新法	(倍)	1280								
	640							2	1	
	320					2				
	160				1					
	80			1	4					
	40		2	6						
	20			8						
	20 未満	20								
	20 未満	20	40	80	160	320	640	1280	(倍)	
	現法									

		現法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	30	0	30
	陰性	0	20	20
計		30	20	50

陽性一致率: 100.0%(30/30)
 陰性一致率: 100.0%(20/20)
 判定一致率: 100.0%(50/50)